

Catalase (CAT) Assay Kit

过氧化氢酶（CAT）检测试剂盒

产品编号	产品名称	规格
BL856A	过氧化氢酶（CAT）检测试剂盒 分光法	96T

产品简介:

过氧化氢酶(CAT, EC 1.11.1.6)普遍存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,其活性与生物体的代谢强度及抗寒、抗病能力有一定关系。本试剂盒提供一种简单,灵敏,快速的测定方法,即 CAT 催化过氧化氢产生水与氧气,剩余的过氧化氢与一种新型显色探针显色,其在 510nm 处有最大吸收峰。通过过氧化氢的减少量来计算样本中 CAT 酶的活力。

本试剂盒突出特点是从紫外波长(240nm: 过氧化氢的检测波长)转换到可见波长(510nm)检测,无需使用石英比色皿或 UV 板。而且由于过氧化氢极其不稳定,直接检测造成读值不稳定,且蛋白质等组分在此紫外波长下也有光吸收,影响结果精确性。

产品组成:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 110mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 100mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	液体×1 支	4℃保存	用前甩几下使试剂落入底部,取 80μL 至新离心管中,再加 1.56mL 蒸馏水混匀备用。
试剂三	液体 11mL×1 瓶	室温	
试剂四	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	
标准品	液体 1 mL×1 支	4℃保存	若重新做标曲,则用到该试剂

使用方法:

建议正式实验前,选取 2 个样本做预测定,了解实验样品情况,熟悉流程,避免样本和试剂浪费!

一、样本准备:

1. 组织样本准备:

- 称取约 0.1g 样本组织(水分充足的样本可取 0.5g),加入 1mL 提取液,进行冰浴匀浆;
- 12000rpm, 4℃离心 10min, 取上清液,置冰上待测。

【注】:若增加样本量,可以按照组织质量(g):提取液为 1:5~10 的比例提取

2. 细菌/细胞样本准备:

- 收集细菌或细胞到离心管内,离心弃上清;
- 取 5×10^6 个细菌或细胞加入 1mL 提取液,超声波破碎细菌或细胞(冰浴,强度 20%或 200W,超声 3S,间隔 10S,重复 30 次);
- 12000rpm, 4℃离心 10min, 取上清液,置冰上待测。

【注】:若增加样本量,可按照每 $0.5 \sim 1 \times 10^7$ 个细菌/细胞加入 1mL 提取液进行提取

3. 液体样本准备:

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.
注意:在体外研究使用,不用于诊断或治疗用途,本产品不是医疗装置。



澄清的液体直接检测；若浑浊则离心后取上清检测。

二、样品测定：

1. 可见分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 510nm，蒸馏水调零。
2. 试剂二事先按照试剂配制要求配制好，再进行以下操作。
3. 在离心管中依次加入：

试剂名称 (μL)	测定管	空白管 (仅做一次)
样本	10	-
试剂一	70	80
试剂二	20	20
混匀，（观察有气泡产生，酶活性越大，则气泡越多）， 室温 25℃准确反应 5min。		
试剂三	100	100
混匀后，立即取 10μL 混合液（若浑浊，则需 8000rpm 离心 10min，取上清进行显色反应）。		


4.显色反应：

试剂名称 (μL)	测定管	空白管 (仅做一次)
混合液	10	10
试剂一	900	900
试剂四	290	290
混匀，室温 25℃反应 5min，取 1mL 转移到 1mL 玻璃比色皿中， 510nm 处测定吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{空白}} - A_{\text{测定}}$ 。		

- 【注】：1. 空白管的颜色（粉红色）最深，若测定管的粉红色很浅或无粉红色即 A 测定值低于 0.25，说明样本里过氧化氢酶活性高，则可对样本用蒸馏水进行稀释后再加样测定，稀释倍数记为 D；或减少样本加样量 V1（如减至 5μL，则试剂一相应增加，保持总体积不变），或减少反应时间 T（如由 5min 减至 1min）。则稀释倍数 D 和改变后的 T 和 V1 需重新代入公式计算。
2. 若测定管颜色与空白管颜色接近，即 ΔA 在零附近(小于 0.01)，说明样本里面过氧化氢酶活性低，则可增加样本加样量 V1（如增至 50μL，则试剂一相应减少，保持总体积不变），或增加反应时间 T（如由 5min 增至 10min 或更长）。则改变后的 T 和 V1 需重新代入公式计算。

三、含量计算

1. 标准曲线方程： $y = 0.2093x - 0.0025$ ；x 为 H_2O_2 标准品(μmol)，y 为 ΔA 。

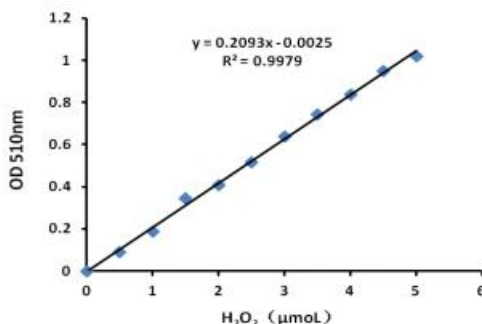

2. 按样本鲜重计算：

酶活定义：在 25℃，每克组织每分钟催化分解 1μmol H_2O_2 定义为一个酶活单位（U）。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.
注意：在体外研究使用，不用于诊断或治疗用途，本产品不是医疗装置。



$$\text{CAT}(\mu\text{mol/L}/\text{min}/\text{g 鲜重})=[(\Delta A+0.0025)\div 0.2093]\div (W\times V1\div V)\div T\times D$$

$$=95.6\times (\Delta A+0.0025)\div W\times D$$

3. 按样本蛋白浓度计算:

酶活定义: 在 25°C, 每毫克组织蛋白每分钟催化分解 1 μmol H_2O_2 定义为一个酶活单位(U)。

$$\text{CAT}(\mu\text{mol/L}/\text{min}/\text{mg prot})=[(\Delta A+0.0025)\div 0.2093]\div (V1\times \text{Cpr})\div T\times D$$

$$=95.6\times (\Delta A+0.0025)\div \text{Cpr}\times D$$

4. 按细胞数量计算:

酶活定义: 在 25°C, 每 10⁴ 个细胞每分钟催化分解 1 μmol H_2O_2 定义为一个酶活单位 (U)。

$$\text{CAT 酶活}(\mu\text{mol/L}/\text{min}/10^4 \text{ cell})=[(\Delta A+0.0025)\div 0.2093]\div (500\times V1\div V)\div T\times D$$

$$=0.191\times (\Delta A+0.0025)\times D$$

5. 按照液体体积计算:

酶活定义: 在 25°C, 每毫升液体每分钟催化分解 1 μmol H_2O_2 定义为一个酶活单位 (U)。

$$\text{CAT}(\mu\text{mol/L}/\text{min}/\text{mL})=[(\Delta A+0.0025)\div 0.2093]\div V1\div T\times D$$

$$=95.6\times (\Delta A+0.0025)\times D$$

V----加入提取液体积, 1 mL

T----反应时间, 5min

500---细胞数量

D---稀释倍数, 未稀释即为 1

V1----加入样本体积, 0.01mL

W----样本质量, g

Cpr----样本蛋白质浓度, mg/mL

附: 标准曲线制作过程:

- 1 制备标准品母液 (250mM)
- 2 把母液稀释成以下浓度: 0, 50, 100, 150, 200, 250mM。也可根据实际来调整浓度。
- 3 20 μL 标准品+80 μL 试剂一+100 μL 试剂三, 混匀后, 取 10 μL 混合液, 按照显色反应阶段测定管加样体系操作, 依据结果即可制作标准曲线

注意事项:

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

4°C保存六个月。

