

ELISA试剂盒使用说明书

Human Pro-Collagen I α 1 ELISA Kit

本试剂盒用于定量检测人血清、血浆或细胞培养上清液等样本中天然和重组 Pro-Collagen I α 1 浓度。使用前请仔细阅读说明书并检查试剂组分，如有任何疑问请与合肥兰杰柯科技有限公司联系，公司将为您提供强有力的技术支持。



全国统一热线：400-600-4213
www.biosharp.cn

目 录

一、产品简介	2
二、检测原理	2
三、试剂盒组分	3
四、储存条件	3
五、注意事项	3
六、其它实验材料	4
七、使用说明	4
7.1、样品收集、处理及保存方法	4
7.2、试剂准备	4
7.3、操作步骤	5
7.4、操作流程圖	6
7.5、操作要点提示	6
7.6、结果判断	6
八、常见问题分析及解决	8

Human Pro-Collagen I α 1 (I型胶原α1前体) ELISA KIT

货号	名称	规格
BSEH-114-48T	Human Pro-Collagen I α 1 (I型胶原α1前体) ELISA KIT	48T
BSEH-114-96T	Human Pro-Collagen I α 1 (I型胶原α1前体) ELISA KIT	96T

一、产品简介


I型胶原α1前体,也称为α-1型I型胶原 (COL1A1),是在人类中由COL1A1基因编码的蛋白质。COL1A1编码I型胶原蛋白的主要组分,胶原蛋白是加强和支持身体中的许多组织的蛋白质,包括软骨,骨,腱,皮肤和眼睛的白色部分(巩膜)。I型胶原是结缔组织如皮肤,骨和腱的最丰富的结构蛋白。最初合成为前胶原分子,其特征是由球形N-和C-末端前肽形成的侧面300nm三螺旋结构域。通过前胶原N-和C-蛋白酶活性去除非螺旋前肽,使得成熟的三螺旋可以自组装成为组织提供拉伸强度的胶原原纤维。I型胶原是由两条α1(I)链和一条α2(I)链组成的异源三聚体,尽管也描述了由三条相同的α1(I)链组成的同三聚体。这些三聚体的绳状前胶原分子必须由细胞外的酶加工。一旦这些分子被加工,它们将它们排列成长而细的原纤维,其在细胞周围的空间中彼此交联。该交联导致非常强的成熟的I型胶原纤维的形成。软骨胶原的α-1链和基底膜的胶原的α-1链由不同的结构基因决定。软骨的胶原仅含有1种类型的多肽链-α-1,这由不同的基因座决定。

胶原蛋白为生物体提供了一种机械支撑作用,维护器官与组织的完整性,保障其正常功能的行使,这对于实质性器官而言非常重要。胶原蛋白是实质性器官——基底膜的主要成分,在骨骼中超过80%的有机质就是I型胶原蛋白,I型胶原蛋白在骨骼与结缔组织中发挥作用的主要方式是形成和保持骨架的完整性;除此之外,胶原在形成特定的细胞外微环境中也起到主要作用,而这些微环境对于维持细胞的完整性及传递细胞外信号非常关键。I型胶原蛋白还有一些很重要的作用,如作为确立细胞形状及行为的信号分子、在细胞分化与发育中起重要作用等。I型胶原蛋白可以通过整合素,盘蛋白结构域受体,等跨膜受体向细胞内传递不断变化的外源刺激信号。它还具有信号“中转站”的功能,能够截留,储存和运输生长因子,从而在器官发育,伤口愈合和组织修复中发挥重要作用。有报道称I型胶原能结合核心蛋白聚糖,从而间接阻断组织中TGF-β的作用,这可能是正常组织中的一种反馈调节。

COL1A1的基因突变将半胱氨酸替代由该基因产生的蛋白质中第134位的氨基酸精氨酸。从而改变的蛋白质与其他胶原蛋白形成蛋白异常相互作用,破坏I型胶原原纤维的结构并捕获细胞中的胶原蛋白。研究人员认为胶原中的这些变化导致Ehlers-Danlos综合征的体征和症状。COL1A1还与成骨不全相关联。其基因突变导致缺少某些片段的蛋白质产生,从而不利于胶原蛋白产生或其抑制蛋白质链之间的基本相互作用。这些对那些富含I型胶原的组织,如皮肤,骨骼,牙齿和腱等都产生不利影响。COL1A1的多态性也被认为似乎增加了发生骨质疏松的风险。

二、检测原理

本实验采用双抗体夹心ELISA。用抗人Pro-Collagen I α 1单克隆抗体预包被酶标板,加入适度稀释的样本和标准品,其中的Pro-Collagen I α 1会与其单抗结合,洗去游离成分;加入生物素化的抗人Pro-Collagen I α 1抗体,抗人Pro-Collagen I α 1抗体与结合在单抗上的人Pro-Collagen I α 1结合而形成免疫复合物,洗去游离的成分;加入辣根过氧化物酶标记的亲合素,生物素与亲合素特异性结合,洗去未结合的酶结合物;加入显色剂,若反应孔中有Pro-Collagen I α 1,辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色;加终止液变黄。在450nm下测OD值,Pro-Collagen I α 1浓度与OD₄₅₀值之间呈正比,可通过绘制标准曲线计算出标本中Pro-Collagen I α 1浓度。

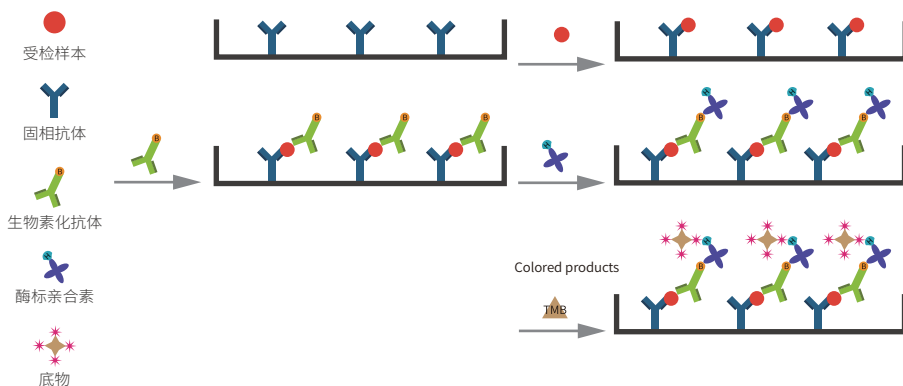

三、试剂盒组成

组分编号	组分	96t	48t	储存条件
BSEH-114-1	标准品	2支	1支	-20℃
BSEH-114-2	标准品和标本稀释液	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-114-3	浓缩生物素化抗体	2支	1支	2-8℃
BSEH-114-4	生物素化抗体稀释液	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-114-5	浓缩酶结合物 (避光)	2支	1支	2-8℃
BSEH-114-6	酶结合物稀释液	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-114-7	浓缩洗涤液20×	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-114-8	显色剂 (避光)	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-114-9	终止液	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-114-10	抗体包被板条	8×12	8×6	2-8℃
BSEH-114-11	封板胶纸	4张	2张	2-8℃
	说明书	1份	1份	

四、储存条件

未启封试剂盒2-8℃保存有效期6个月, 启封后建议一个月内使用完毕。产品收到后标准品-20℃保存, 其它组分2-8℃保存。

五、注意事项

- 1、试剂盒保存在2-8℃, 除复溶后的标准品, 其它成分不可冷冻。
- 2、浓缩生物素化抗体、浓缩酶结合物装量极少, 运输中颠簸和可能的倒置会使液体沾到管壁或瓶盖。使用前请离心处理以使附着于管壁或瓶盖的液体沉积到管底。
- 3、不同批号试剂不可混用。
- 4、为避免交叉污染请使用一次性吸头。
- 5、终止液和显色剂具腐蚀性, 避免皮肤及粘膜直接接触, 一旦接触到这些液体, 请尽快用大量水冲洗。
- 6、使用干净的塑料容器配制洗涤液, 使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。
- 7、洗涤酶标板时应充分拍干, 不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。
- 8、不要用其它来源的试剂混合或替代该产品的组分, 不同批号的试剂盒组份不能混用, 请在有效日期内使用本产品。

- 9、在试验中标准品和样本检测时建议作双复孔或三复孔，加入试剂的顺序应一致，以保证所有反应孔孵育的时间一样。
- 10、充分混匀对反应结果尤为重要，最好使用微量振荡器(使用最低频率进行振荡)。
- 11、避免操作过程中酶标板干燥，干燥会使酶标板上生物成分迅速失活，影响实验结果。
- 12、适当的稀释样品，使样品值落在标准曲线范围内，根据待测因子含量高、中、低的不同，建议采用1:100、1:10、1:2稀释样品。如果样品OD值高于最高标准，适当增加稀释度并重复检测。
- 13、标准品稀释液，操作人，移液方式，洗涤方法，孵育时间及温度，试剂盒批次的不同均可能会导致结果的差异。
- 14、此法可有效的消除可溶性受体、结合蛋白以及生物样品中的其他因素的干扰。

六、其它实验材料

- 1、酶标仪(450nm)
- 2、高精度可调移液器及吸头：0.5-10, 2-20, 20-200, 200-1000μL;一次检测样品较多时，最好用多通道移液器
- 3、自动洗板机或洗瓶
- 4、37℃水箱
- 5、双蒸水或去离子水
- 6、坐标纸
- 7、量筒


七、使用说明

7.1 样品收集、处理及保存方法

- 1.血清：使用不含热原和内毒素的试管，收集血液后，室温凝血30min，1000×g离心10min，小心分离血清。
- 2.血浆：用EDTA、柠檬酸盐、肝素作为抗凝剂收集血浆，收集后30min内以1000×g离心15min去除颗粒。
- 3.细胞上清液：1000×g离心10min去除颗粒和聚合物。
- 4.保存：若样品不立即检测，请将其按一次用量分装，-20℃~-70℃保存，避免反复冻融。尽量避免使用溶血或高血脂样本。如果血清中含有大量颗粒，检测前先离心或过滤去除；室温下解冻，请勿于37℃或更高的温度加热解冻。
- 5.稀释：可根据实际情况，将标本做适当倍数稀释(建议做预实验，以确定稀释倍数)。

7.2 试剂准备

- 1.提前30min从冰箱中取出试剂盒，平衡至室温。
- 2.洗涤缓冲液：从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，这属于正常现象，加热并轻轻摇晃使结晶完全溶解后再配制。将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:20)。未用完的放回4℃。
- 3.标准品：加入标准品/标本稀释液1.0mL至冻干标准品中，待彻底溶解后，静置15分钟混匀(浓度为2000pg/mL)，然后根据需要进行稀释，见下图(建议标准曲线使用以下浓度：2000、1000、500、250、125、62.5、31.25、0pg/mL)。稀释的标准品不得重复使用，未用完的标准品应按照一次用量分装后，将其放在-20~-70℃贮存，一次性使用，避免反复冻融。

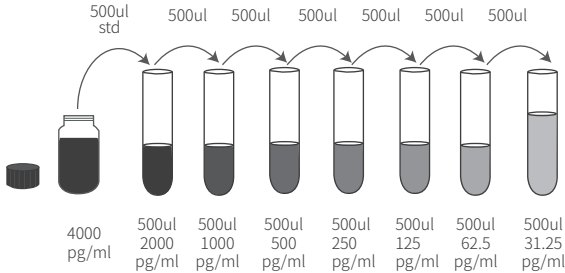

标准品稀释方法

4、生物素化抗体工作液：根据每孔需要100μL来计算总的用量，多配制100-200μL。以生物素化抗体稀释液稀释浓缩生物素化抗体(1:100)。最好现用现配。

浓缩生物素化抗体稀释方法

所用板条数	浓缩生物素化抗体	+	生物素化抗体稀释液
12	110μL	+	10890μL
10	90μL	+	8910μL
8	70μL	+	6930μL
6	50μL	+	4950μL
4	33μL	+	3267μL
2	17μL	+	1683μL
1	9μL	+	891μL

5、酶结合物工作液：以酶结合物稀释液稀释浓缩酶结合物(1:100)。最好现用现配。


浓缩酶结合物稀释方法

所用板条数	浓缩酶结合物	+	酶结合物稀释液
12	110μL	+	10890μL
10	90μL	+	8910μL
8	70μL	+	6930μL
6	50μL	+	4950μL
4	33μL	+	3267μL
2	17μL	+	1683μL
1	9μL	+	891μL

7.3 操作步骤

- 1.按照上述准备工作配制好各种溶液。
- 2.根据待测样品数量和标准品的数量决定所需的板条数，并增加1孔作为空白对照孔。分别将标本和不同浓度标准品(100μL/孔)加入相应孔中(零孔只加标准品/样本稀释液)，用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育90分钟(空白对照孔除外)。
- 3.洗板4次：(1)自动洗板机：要求注入的洗涤液为350μL，注入与吸出间隔15-30秒。(2)手工洗板：甩尽孔内液体，每孔加洗涤液350μL，静置30秒后用尽液体，在厚迭吸水纸上拍干。
- 4.加入生物素化抗体工作液(100μL/孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育60分钟(空白对照孔除外)。
- 5.洗板4次。
- 6.加入酶结合物工作液(100μL/孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育30分钟(空白对照孔除外)。
- 7.洗板4次。
- 8.加入显色剂100μL/孔，避光，37℃孵箱孵育10-20分钟。
- 9.加入终止液100μL/孔，混匀后即刻测量OD₄₅₀值(5分钟内)。

7.4 操作流程图

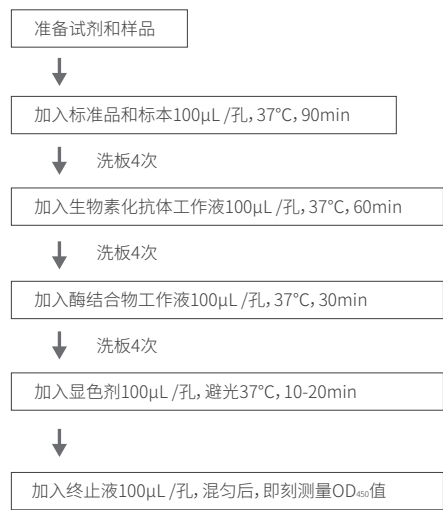


7.5 操作要点提示

- 1. 配制各种试剂时要充分混匀, 但要避免产生大量泡沫, 以免加样时加入大量的气泡, 产生加样误差。
- 2. 为避免交叉污染, 在加入不同浓度的标准品、不同样品、不同试剂时谨记及时更换吸头。
- 3. 为了确保准确的结果, 在每次孵育前均需使用新封板胶纸封住反应孔。
- 4. 显色剂在添加之前, 应保持无色, 请勿使用已变为蓝色的显色溶液。最佳显色时间对标准曲线很重要, 肉眼可见前3-4孔有梯度蓝色, 后3-4孔差别不明显, 零孔无蓝色出现即可终止。
- 5. 每次检测均要做标准曲线, 根据样品待测因子的含量, 适当稀释或浓缩样本, 最好做预实验。

7.6 结果判断

- 1. 每个标准品和标本的OD值应减去空白孔的OD值, 如果做复孔, 求其平均值。
- 2. 使用计算机软件以吸光度OD值为纵坐标(Y), 相应的Pro-Collagen I α 1标准品浓度为横坐标(X), 生成相应的标准曲线, 样品的Pro-Collagen I α 1含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。
- 3. 若标本OD值高于标准曲线上限, 应适当稀释后重测, 计算浓度时应乘以稀释倍数算标本含量。
- 4. 参考数据

标准品浓度(pg/mL)	OD值1	OD值2	平均值	矫正值
0	0.028	0.032	0.030	—
31.25	0.08	0.075	0.078	0.048
62.5	0.120	0.124	0.122	0.061
125	0.240	0.220	0.230	0.200
250	0.405	0.349	0.377	0.337
500	0.713	0.635	0.674	0.644
1000	1.232	1.106	1.169	1.139
2000	1.967	1.961	1.964	1.934

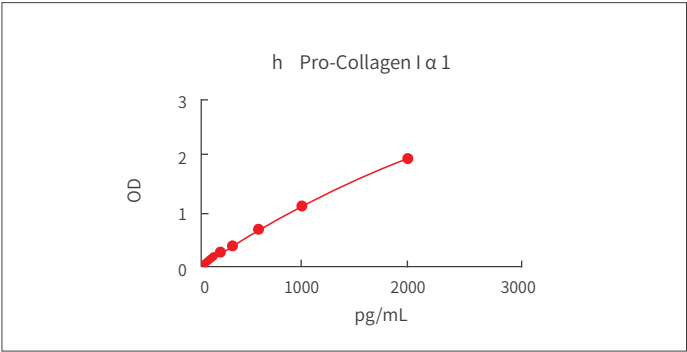

注: 本图仅供参考, 应以同次试验标准品所绘标准曲线为准

结果重复性:

板间, 板内变异系数均<10%。

灵敏度:

最低检测人Pro-Collagen I α 1剂量小于15pg/mL。最低检出量测定方法: 20个零标准的平均OD值增加两个标准差, 再计算相应的浓度。

特异性:

此试剂盒可检测天然和重组的人Pro-Collagen I α 1, 以50ng/mL平行做特异性试验, 均不与下列细胞因子及蛋白反应。

重组人细胞因子	
BMP-1	
Collagen II (pro)	
Collagen III α1 (pro)	
Collagen XXIII α1	
Mrc2	

八、常见问题分析及解决

问题	可能原因	解决办法
无颜色	不同试剂盒或不同批号的试剂混合	重新检查试剂的标签, 确保所有组分都属于正使用的试剂盒中的。不能混用不同试剂盒或不同批号的试剂。
	漏加酶	检查操作流程, 注意不要漏加
	HRP酶污染了叠氮钠	使用新配制的试剂, 禁叠氮钠
显色弱	试剂配制/使用有误	重做试验, 严格按照说明书操作, 每次配制和使用前看清标签
	超过有效期的产品可能会产生很弱的信号	检查产品有效期
	缩短孵育时间能使实验信号变弱	检查孵育时间
	使用了被污染的试剂	检查试剂是否被污染
	仪器设定不正确, 滤光片不匹配	仪器是否设定正确, 滤光片的使用等
	洗涤操作不规范	洗涤不充分, 使用手工洗板常出现
		洗瓶洗涤, 每孔应完全充满洗涤缓冲液, 倾出时应迅速
		若用洗板机, 应校准并设定足够充满每孔的体积量, 板内侧不应接触设备
		检查每孔是否有残留的洗液或每孔加样量的体积是否准确 可在两次洗板之间加30秒的浸泡
高背景	实验中孵育温度和时间不适当	确定每一试验步骤的孵育温度和时间是否适当
	酶加量过多	加酶前验看移液器调节量是否准确
		检查稀释度, 若必要进行效价测定
全部板子变成规则的蓝色	不充分的洗涤/洗涤步骤被遗漏使没结合的HRP仍有残留	最好使用洗板机充分洗涤 检查每孔是否有残留的洗液或加样量是否准确
	太多的酶结合物	检查稀释度, 必要时进行效价测定
	封板膜或试剂容器被重复使用, 导致HRP残留, 使TMB底物产生非特异蓝色	使用新封板膜, 每步使用不同的试剂容器
高CV值花板	操作不慎或洗涤不充分	按说明书洗板、加样和显色, 洗板尤为重要
	出现干板, 没有使用封板膜、封板膜重复使用	确定每两步骤间酶标板应保持湿润 使用封板膜封口, 注意每步使用新鲜的封板膜
	移液器不准确, 吸头重复使用	检查并校准移液器, 每次取样必须更换吸头
	酶结合物不足	检查稀释度, 必要时进行效价测定
标准曲线可得到, 但两点之间区别很差 (低或平的曲线)	检测抗体不足	检查稀释度, 必要时进行效价测定
	板子显色不足	延长底物孵育时间
		使用推荐品牌的底物溶液
标准曲线很好, 但没有任何期望的阳性信号	标本中无相应的待检测物质	使用内参对照
	标本基质遮盖检测	重复实验, 重新考虑实验的相应参数
		将标本至少做1:2相应的稀释, 或进行系列稀释
标准曲线很好, 但标本的判读值很高	标本中含的待检物质水平超过实验范围	稀释标本
边缘效应	工作环境温度不均衡	避免将板子在变化温度环境中孵育
漂移	实验过程中出现间断	整个实验应连续操作, 在实验开始前将所有的标准品和标本做适当的准备。
	试剂没有按说明书平衡至室温	在所有试剂加入孔前, 确保它们已平衡至室温, 除非说明书中有另外的要求。
	是否可更改试剂盒所提供的操作步骤?	一般厂商为确保最高的灵敏度, 对试剂盒都进行了优化, 为确保每一试剂盒实验的规范性应按说明书操作。
	是否可混用不同批次试剂盒中的试剂?	不可以, 绝大多数试剂在每批试剂盒中是特异的, 若有问题可与厂家或代理商联系。
	是否可增加或减少标本的体积?	商品化的试剂盒所需加入的标本体积是优化的, 应按说明书操作, 不建议更改所加标本体积。
	是否可重新确定自己的标准曲线的点?	可以。说明书上有建议制备标准曲线时标准品的稀释度, 可改变稀释倍数和增加曲线的点, 但是必须在实验范围内, 高于试剂盒中最高标准品的点和低于灵敏度以下的点是无效的。

实际加样情况表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12