

Soil N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase Activity Assay Kit

土壤 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(S-NAG)活性检测试剂盒 微板法

产品编号	产品名称	规格
BL1774B	土壤 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(S-NAG)活性检测试剂盒 微板法	48T

产品简介:

土壤 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 (NAG, EC 3.2.1.52) 是溶酶体中的一种酸性水解酶, 由土壤微生物分泌, 该酶的活性变化与机体某些病理状态密切相关。

土壤 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 (S-NAG) 分解 4-硝基酚-β-N-乙酰氨基葡萄糖生成对-硝基苯酚 (PNP), 在 405nm 处检测该产物的升高速率, 来计算 S-NAG 活力大小。

产品组成:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	粉末×1 支	-20℃保存	临用前加入 7.6mL 蒸馏水, 充分溶解备用, 用不完的试剂仍-20℃保存;
试剂二	40mL×1 瓶	4℃保存	
试剂三	40mL×1 瓶	4℃保存	
标准品	粉末×1 支	4℃保存	若重新做标曲, 则用到该试剂

使用方法:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

一、样本准备

取新鲜土样或干土 (风干或者 37 度烘箱风干), 先粗研磨, 过 40 目筛网备用。

【注】: 土壤风干, 减少土壤中水分对于实验的干扰; 土壤过筛, 保证取样的均匀细腻。

二、样品测定

1. 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 405nm。
2. 在离心管中加入:

试剂名称 (μL)	测定管	对照管	空白管 (仅做一次)
土样 (g)	0.05	0.05	-
试剂一	150	-	150
蒸馏水	-	150	-
试剂二	300	300	300
混匀, 37℃ (水浴锅或恒温培养箱) 振荡反应 1h			
试剂三	350	350	350
混匀, 12000rpm, 离心 10min, 取上清液 200μL 于 96 孔板中, 于 405nm 下读取吸光值 A, $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}} - A_{\text{空白}}$ (每个测定管需设一个对照管)。			

【注】 1. 若 ΔA 在零附近徘徊, 可延长 37℃ 的孵育时间 T (如增至 4 小时或更长), 或增加土样质量 W (如增至 0.2g)。则改变后的 T 和 W 需代入计算公式重新计算。


Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.
 注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。



2.若测定管 A 值大于 1.5 或 ΔA 大于 1.5, 可缩短 37°C 的孵育时间 T (如减至 0.5 小时或更短)。则改变后 T 需代入计算公式重新计算。或对最后一步的待检测上清液 (包括测定管、对照管和空白管) 同时用蒸馏水进行稀释, 稀释倍数 D 代入计算公式。

三、结果计算

1. 标准曲线: $y = 0.0959x - 0.0056$; x 为标准品质量 (μg), y 为吸光值 ΔA 。

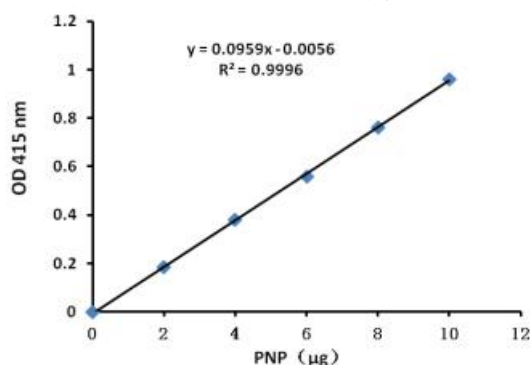

2. 单位定义: 每小时每克土样中产生 1nmol 对-硝基苯酚 (PNP) 定义为一个酶活单位。

$$\begin{aligned} \text{S-NAG 活力}(\text{nmol/h/g 土样}) &= (\Delta A + 0.0056) \div 0.0959 \div \text{Mr} \times 10^3 \div W \div T \times D \\ &= 75 \times (\Delta A + 0.0056) \div W \times D \end{aligned}$$

T---反应时间, 1h

W---实际称取土样质量, g

Mr--- PNP 相对分子质量, 139.11

D---稀释倍数, 未稀释即为 1

附: 标准曲线制作过程:

1. 制备标准品母液 (1mg/mL): 向标准品离心管里面加入 1mL 蒸馏水。
2. 把母液稀释成以下浓度梯度的标准品: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
3. 在离心管中依次加入: 20 μL 标准品+130 μL 蒸馏水+300 μL 试剂二+350 μL 试剂三, 混匀, 取 200 μL 至 96 孔板中, 于 405nm 下读取吸光值。
4. 根据结果制作标准曲线。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

-20°C 保存六个月。

