

Soil Urease Activity Assay Kit

土壤脲酶(S-UE)活性检测试剂盒 分光法

产品编号	产品名称	规格
BL881A	土壤脲酶(S-UE)活性检测试剂盒 分光法	24T

产品简介:

土壤中的脲酶主要来源于微生物和植物，它仅能水解土壤中的尿素，最终产物是氨和碳酸。土壤脲酶活性与土壤的微生物数量、有机物质含量、全氮和速效氮含量呈正相关。常用土壤脲酶活性表征土壤的氮素状况。本试剂盒采用靛酚蓝比色法：即脲酶水解尿素产生 $\text{NH}_3\text{-N}$ ，其在强碱性介质中与次氯酸盐和苯酚反应，生成水溶性染料靛酚蓝，该物质在 578nm 有最大光吸收，其深浅与溶液中的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 含量呈正比，进而得出土壤脲酶活力大小。

产品组成:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	粉末×1 瓶	4℃保存	临用前加入 6mL 蒸馏水，充分溶解备用，用不完的试剂仍 4℃保存。
试剂二	30mL×1 瓶	4℃保存	
试剂三	13mL×1 瓶	4℃保存	避光保存。
试剂四	7mL×1 瓶	4℃保存	
试剂五-A	7mL×2 瓶	4℃保存	临用前取 60μL 的试剂五-B 加入至一瓶试剂五-A 中，混匀后作为试剂五工作液使用。混匀后的试剂五一周内用完。
试剂五-B	液体×1 支	4℃保存	
标准品	1 mL×1 支	4℃保存	若重新做标曲，则用到该试剂。

使用方法:

建议正式实验前，选取 2 个样本做预测定，了解实验样品情况，熟悉流程，避免样本和试剂浪费。

一、样本准备

取新鲜土样风干或者 37 度烘箱风干，先粗研磨，过 40 目筛网，备用。

【注】：土壤风干，减少土壤中水分对于实验的干扰。

二、样品检测

1. 培养：在离心管中依次加入：

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
土样(g)	0.1	0.1
甲苯	40	40
振荡混匀，室温放置 15min		
试剂一	200	-
试剂二	400	600
混匀，放入 37℃水浴锅或恒温培养箱中孵育 24h		
蒸馏水 (37℃)	360	360
混匀，12000rpm，25℃离心 10min，取上清液。		

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.
 注意：在体外研究使用，不用于诊断或治疗用途，本产品不是医疗装置。



2. 可见分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 578nm，蒸馏水调零。
3. 显色反应：在离心管中依次加入


试剂名称 (μL)	测定管	对照管
上清液	60	60
蒸馏水	180	180
试剂三	240	240
试剂四	120	120
试剂五工作液	240	240
充分混匀，37℃放置 20min 后，全部液体转移至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，于 578nm 处读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ （每个样本做一个自身对照）。		

【注】1. 试剂三和四和五需分开加，不能事先混匀。

2. 若 ΔA 值较小，可增加取样质量 W(如 0.2g 或更多)或在显色反应阶段增加上清液量 V1(如增至 120μL，则蒸馏水体积相应减少)；则改变后的 W 和 V1 需代入计算公式重新计算。
3. 若 A 测定的值大于 1.8，可在显色反应阶段减少上清液的量 V1(如减至 30μL，则蒸馏水体积相应增加)；则改变后的上清液体积 V1 需代入计算公式重新计算。

三、结果计算

1. 标准曲线方程为 $y = 1.0438x - 0.0015$ ；x 为标准品质量 (μg)，y 为吸光值 ΔA 。

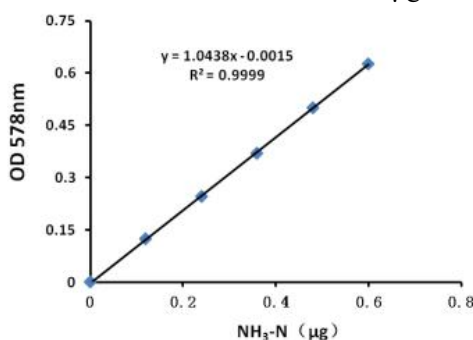

2. 土壤脲酶活性定义：每天每克土样中产生 1μg 的 NH₃-N 定义为一个酶活力单位。
土壤脲酶活力(μg/d/g 土样) = $(\Delta A + 0.0015) \div 1.0438 \times (V \div V1) \div W \div T = 16 \times (\Delta A + 0.0015) \div W$

V---反应总体积：1000μL

V1---显色反应中上清液体积：60μL

T---反应时间，24h=1d

W---土壤样本实际取样质量，g

附：标准曲线制作过程：

1. 把标准品母液（1mg/mL），用蒸馏水稀释成以下浓度梯度的标准品：0，2，4，6，8，10 μg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
2. 在显色反应阶段，按照测定管加样表操作，依据结果即可制作标准曲线。

注意事项：

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：

4℃保存六个月。

